

# PEARL CLAVE

パールクレーブ TC-220E/TC-260E/TC-330E

小型・軽量で使いやすいフルオートマチック  
卓上型高圧蒸気滅菌器です。



滅菌作業を全自動運転!

オートクレーブのベストセララーです。



## 特徴

### 使いやすいフルオートマチック

電源・乾燥タイマーをセットするだけで一連の滅菌作業を全自動運転、優れた操作性を発揮します。

### コンパクト設計

専用の給水、排水設備が必要なく、小型軽量のため、設置場所を取りません。

### 抜群の乾燥効果

ダブルヒータによる通気乾燥方式を採用し、ふたを閉めたままでさっぱりとした乾燥効果が得られます。

### 多彩な安全機能

信頼と安心のきめ細かな安全機能により、機器を取り扱う人の安全を守ります。



## TC-220E

操作・保守も簡単！  
使いやすさが好評です。



## TC-260E

長年の実績により、  
耐久性・安全性は実証済みです。



## TC-330E

エアーポンプによる  
熱風乾燥方式の採用で  
より効率的な乾燥を実現しました。






# 仕様

型式 **TC-220E / TC-260E**  
 承認番号 (220E) 21900BZX00826000  
 (260E) 21900BZX00830000

型式 **TC-330E**  
 承認番号 21900BZX00833000

<外形寸法 (mm)>

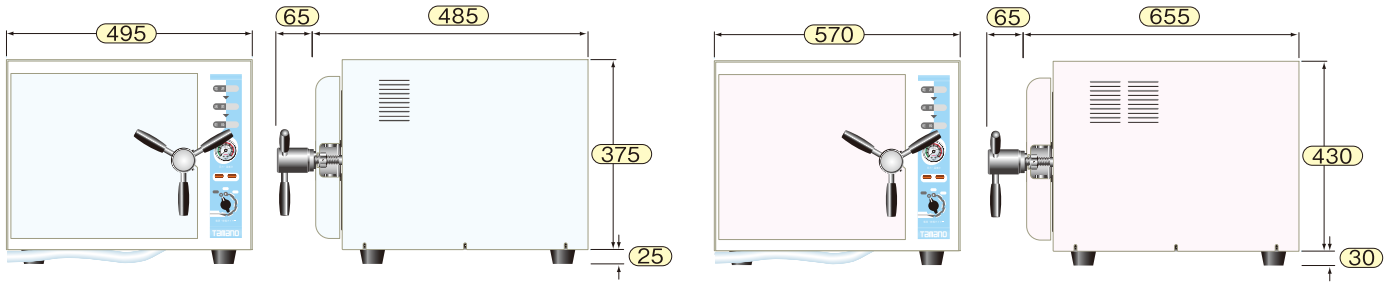

型式	TC-220E	TC-260E	TC-330E
チャンバー寸法	(W) φ220mm×(D)345mm	(W) φ260mm×(D)345mm	(W) φ316mm×(D)475mm
チャンバー容量	13L (丸カストφ18cm×2個)	18L (丸カストφ21cm×2個)	36L (丸カストφ27cm×2個)
電源電圧	AC100V 15A 50/60Hz		AC100V 20A 50/60Hz
消費電力	1.2kVA		1.85kVA
重量	約30kg		約60kg
給・排水方式	自動給排水方式		
滅菌温度(圧力)	132℃(0.19MPa)		121℃(0.105MPa)
滅菌時間	10分		20分
乾燥方式	加熱式(通気乾燥方式)		加熱式(熱風乾燥方式)
乾燥時間	3~30分(可変式)		
クラス分類	管理医療機器(クラスII)・特定保守管理医療機器		
許可番号	13B2X10064		
オプション	架台 220		架台 330
	角カスト K-220 / 平カストH-220	角カスト K-260 / 平カストH-260	平カスト H-330
	半月カゴ 220	半月カゴ 260	半月カゴ 330

## TC-220E/TC-260E/TC-330E 専用オプション



**電源**

220E/260E 用	TC-330E 用
コンセントプラグ	コンセントプラグ
コンセント	コンセント
125V 15A	WF2320BK 250V 20A パナソニック

販売店

ご購入・ご相談は、下記へお問い合わせください。



本社 〒173-0026 東京都板橋区中丸町18-10 TEL03(3974)9600 FAX03(3974)9650  
 新潟営業所 〒950-2004 新潟市西区平島1301 中野プラザ106 TEL025(233)3377  
 大阪営業所 〒530-0043 大阪市北区天満1-3-12 高尾ビル1F TEL06(6352)6440